


Starten der Rythmic Evolution PCA-Pumpe

1. Startset –siehe auch: Füllen des Reservoirbeutel




2. Einlegen des Reservoirbeutels

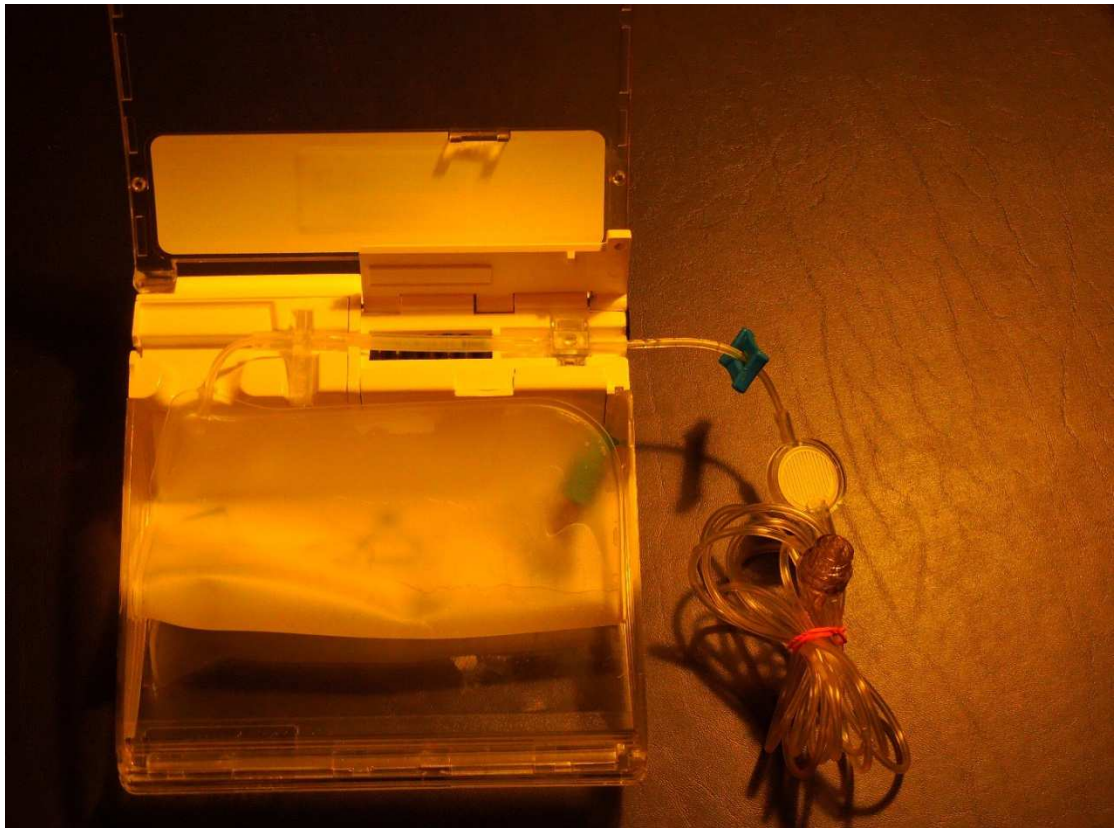

3. Start der Pumpe: On/Off – Code bestätigen (Enter)




4. Auswahl der Aktion/des Pumpenprogramms – bestätigen (Enter)
5. Pumpe starten mit Doppelklick (Start/Stop)

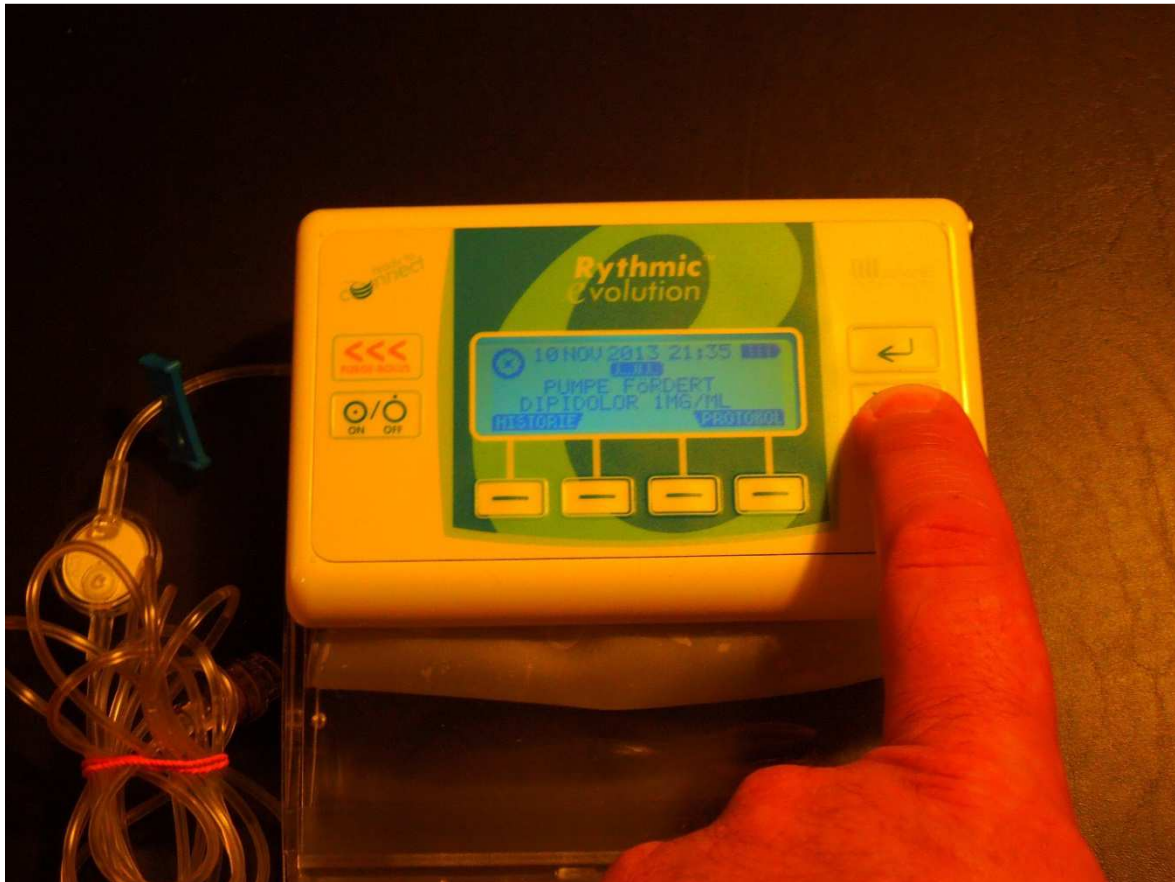


Füllen des Reservoirbeutel


1. Klemmen Sie den Schlauch ab, um einen unkontrollierten Fluss zu verhindern.

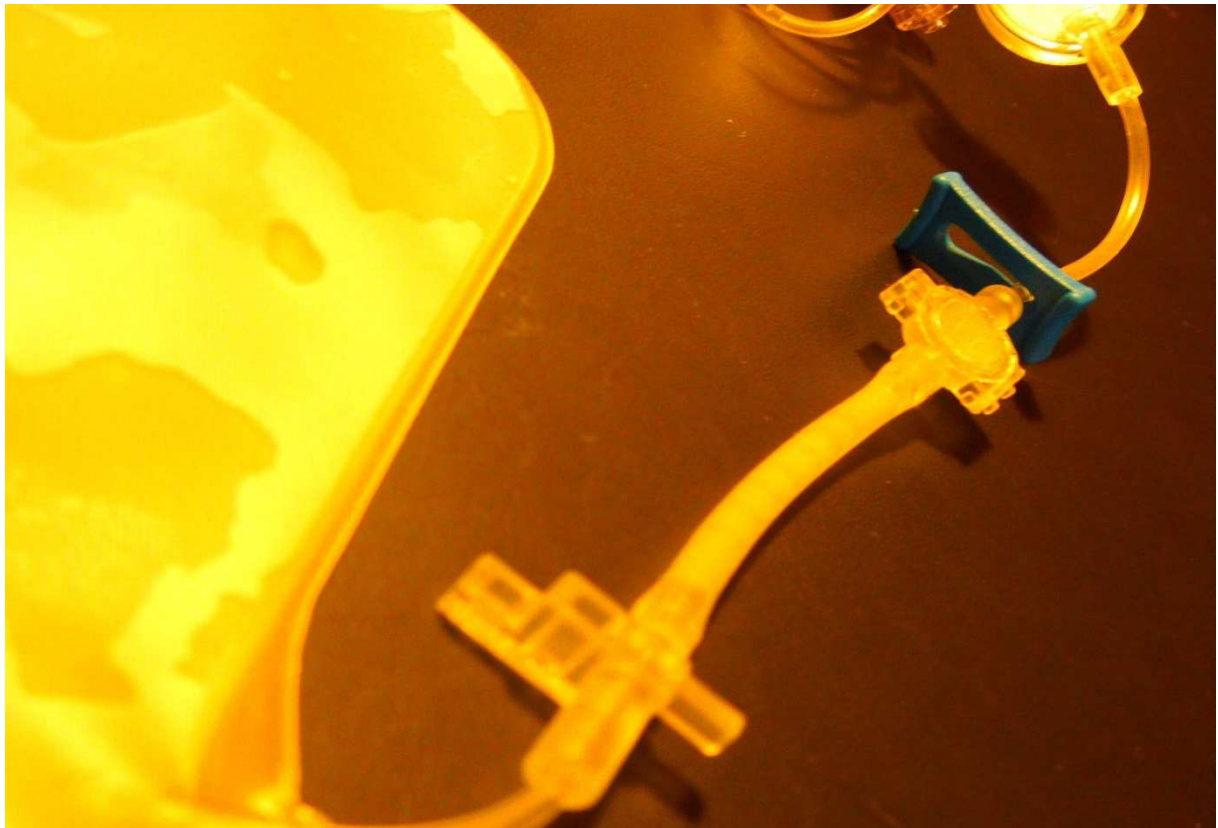


2. Füllen Sie das Reservoir mit Hilfe des Reservoirinjektionsports vorsichtig mit Flüssigkeit. Achten Sie darauf, dass die Spritze ganz in das Ventil eingeführt wird (keine Kanüle verwenden). Fahren Sie fort, bis das Reservoir mit dem verordneten Volumen gefüllt ist. (max. 160 ml)

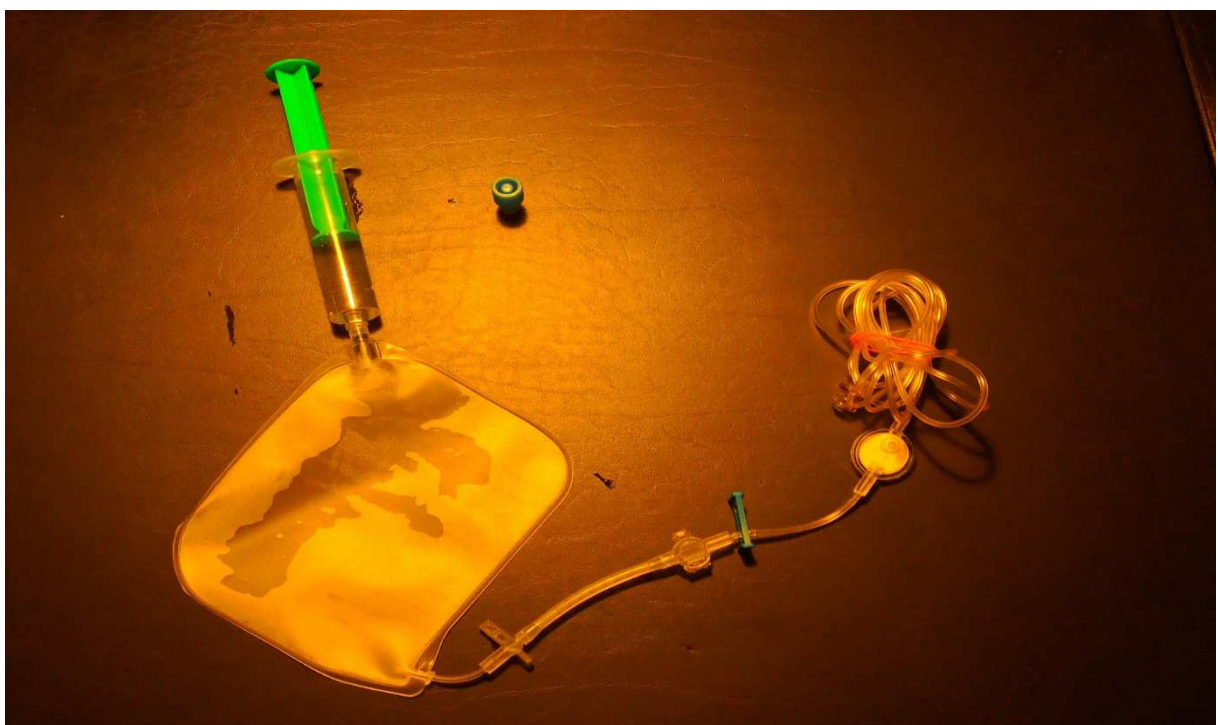

3. Halten Sie das Reservoir vertikal und entfernen Sie mit Hilfe der Spritze sämtliche Luft.

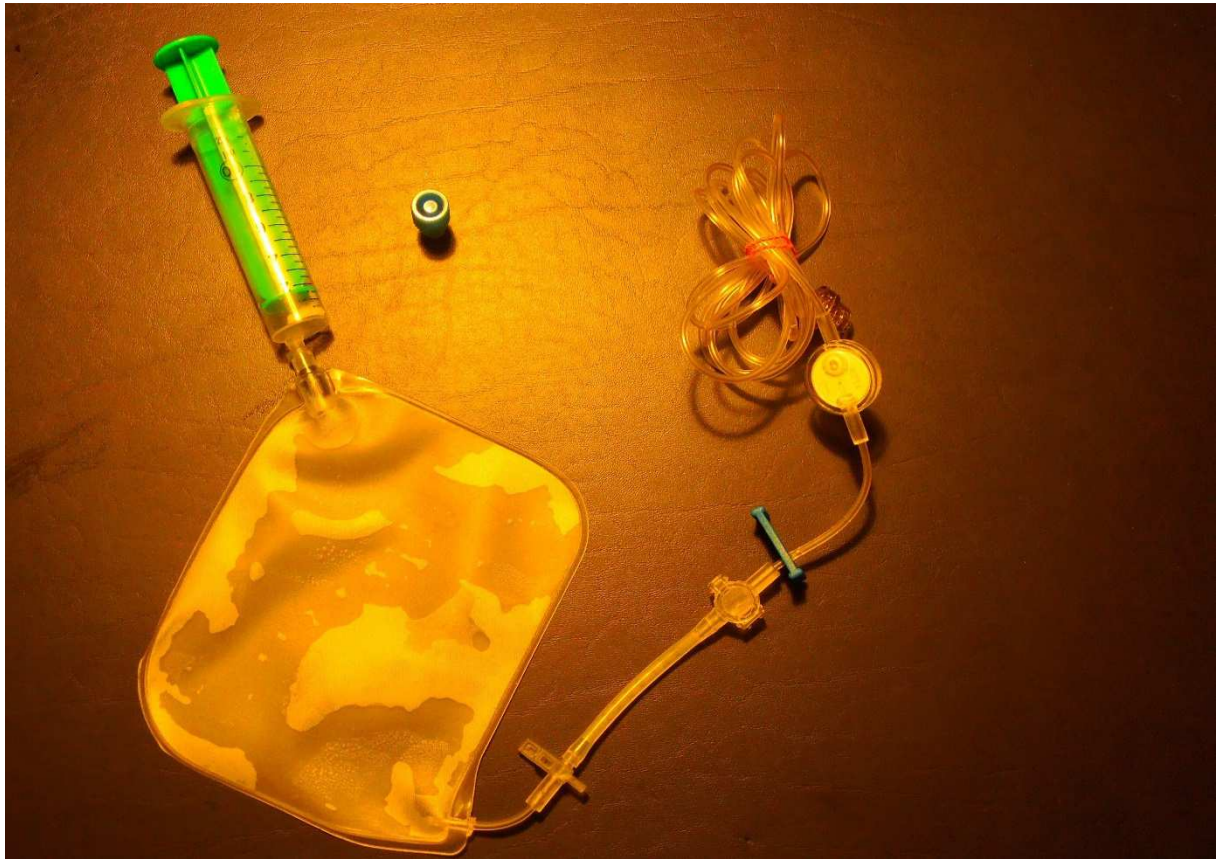

4. Entfernen Sie die Spritze. Quetschen Sie den Beutel sanft, um die noch verbliebenen Luftblasen durch den Inline-Filter zu entfernen und kontrollieren Sie die ordnungsgemäße Funktion desselben.

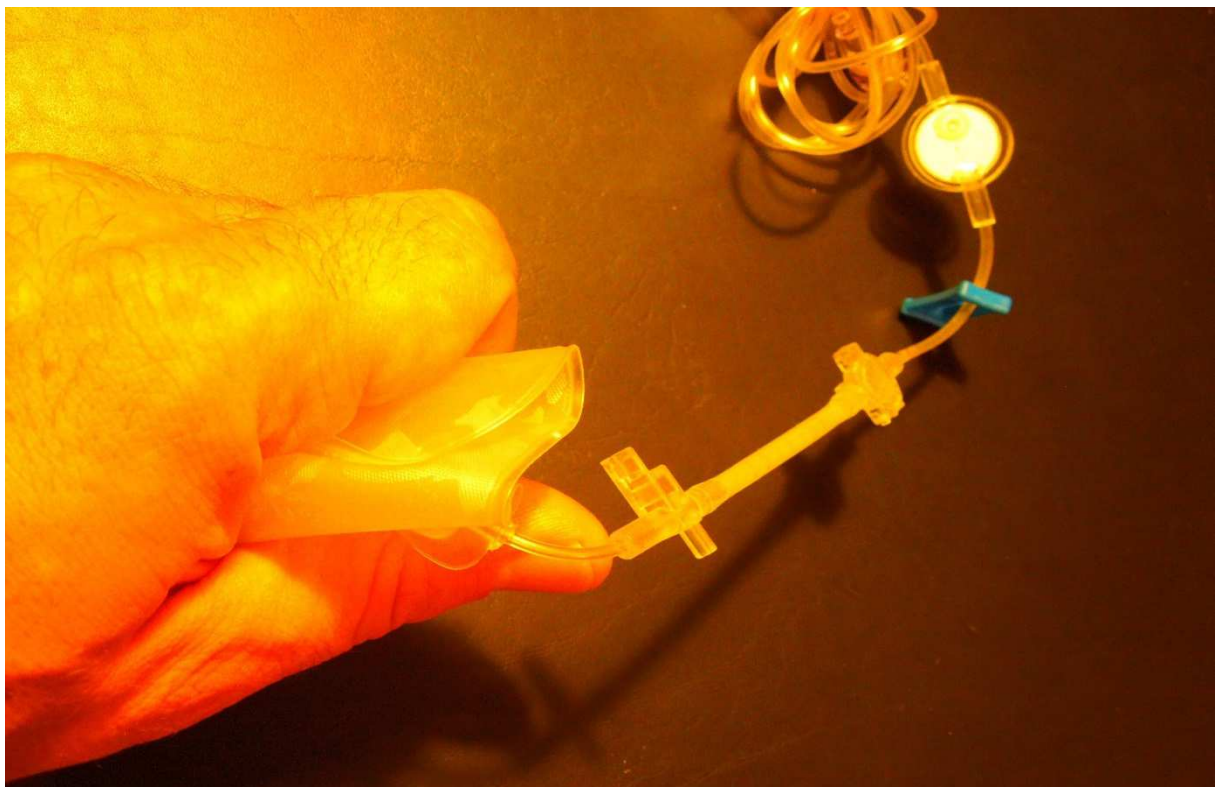


Wechsel des Reservoirbeutels

1. Stoppen Sie die Pumpe




2. Öffnen Sie die Pumpe – Entfernen Sie das leere Reservoir – Legen Sie das volle Reservoir ein (siehe auch: Füllen des Reservoirbeutels)

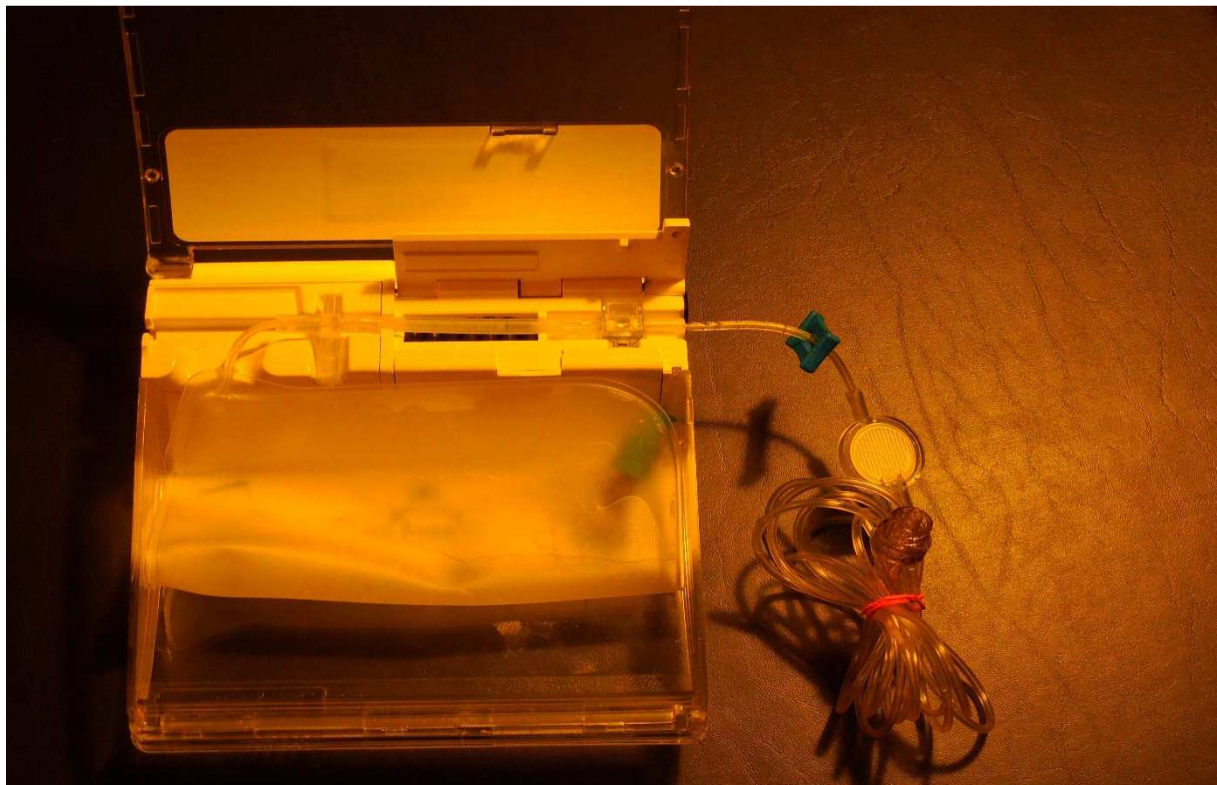

3. Geben Sie das neue Reservoirvolumen ein – Programm –Code: 0011



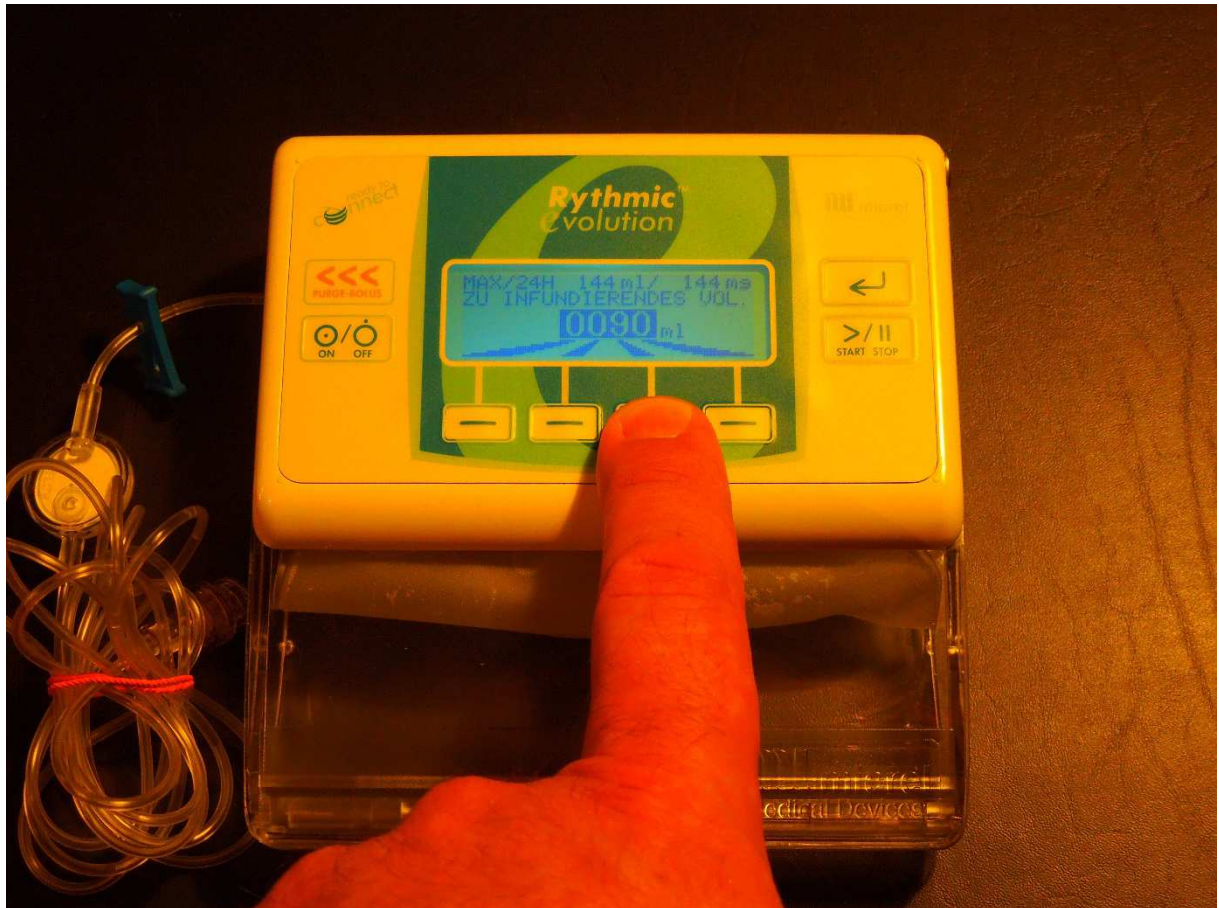

„Haben Sie das System entlüftet“ - Bestätigen